


Die klassische **Riegelverschlusskassette Typ G**

The **classic X-ray cassette** with lever side lock **type G**



This frame guarantees most mechanical and termical strain.

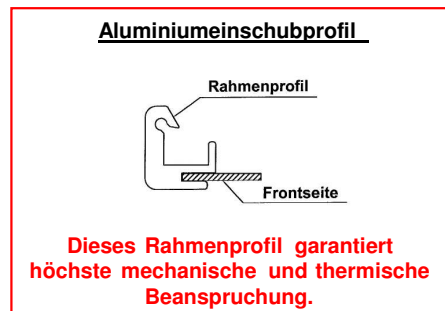

(D)

- sicheres Verriegeln durch mehrfache Nocken
- verwendbar als universelle Röntgenkassette in der Radiologie
- in jeder Größe, auch als **Sonderformat** lieferbar
- lieferbar als **Typ GR: Rasterkassette** für den Einbau von Rastern, mit 4 mm Schaumstoff ausgestattet
- verwendbar als **Typ GA: Autoradiographiekassette** (bis -80°C)
- als **Fensterkassette** mit EU- oder US-Fenster lieferbar, mit grün- oder blauemittierenden Verstärkungsfolien
- nach DIN EN ISO 4090:2004-08 und IEC 60406

(GB)

- safe locking by several cams
- the universal X-ray cassette for radiologics
- available: - in standard or special size
 - as **grid cassette (GR)**, equipped with thinner foam
 - for **autoradiographics (GA)** up to -80°C
 - without or with window EU- or US-type
 - without or with blue or green emitting intensifying screens
- according to DIN EN ISO 4090:2004-08 and IEC 60406

Technische Beschreibung:


Frontseite: Aluminiumblech, einbrennlackiert RAL 7035
Rückseite: Aluminiumblech, blau lackiert
Rahmen: Aluminiumeinschubprofil
Scharniere: Aluminium
Andruckpolster: oberflächenversiegelter
PE – Schaumstoff (FCKW-frei)
Eckverbinder: Aluminiumdruckgusslegierung

technical description:

front side: aluminium, painted white
back side: aluminium, painted blue
frame: aluminium profile
hinges: aluminium
pressure pad: surface sealing PE foam
corners: aluminiumalloy

Fenstertypen / types of windows

- **C1-N (EU-pin type)**
77 x 15 mm

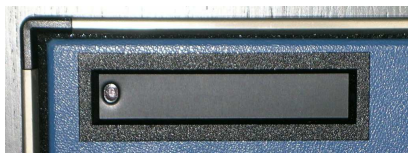

- **C1 (US-pin type)**
74 x 25 mm



- **C1-E (EU-pin type geöffnet/opened)**
74 x 16 mm



- **3M (pin type)**
64 x 16 mm



- **C3 (EU-magnetic type)**
64 x 16mm



Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt als unverbindlich.
Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.
All prints in this brochure are not binding and subjects to alterations.



DIN EN ISO 9001 : 2008
REG.NR.: 292498 QM08

rego X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING
Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

